

# DynaMed Plus モバイルアプリ インストールの流れ

アプリのインストール方法  
(アクティベーション)と  
アプリ内の情報の更新について  
説明します。

DynaMed Plusのアプリを各種携帯端末にインストールして利用できます。

■ iPad、iPhone

■ Android携帯、Androidタブレット端末

※ **無料**でインストールして、**オフライン**で利用できます。

最大1,000MBほどの空き容量を要します。



※ インストール時には、**Wifi**に接続してください。

# インストール手順 (iPhoneの例)

1. App Storeで、右図にある  
**DynaMed Plus**アプリをダウンロード  
します(\*ここではまだ開かない)。

※ Android端末の場合は、**Google Play**へ

■注意■ ここで「開く」をタップ  
せず、次頁の「アクティベーション」  
に進んでください。

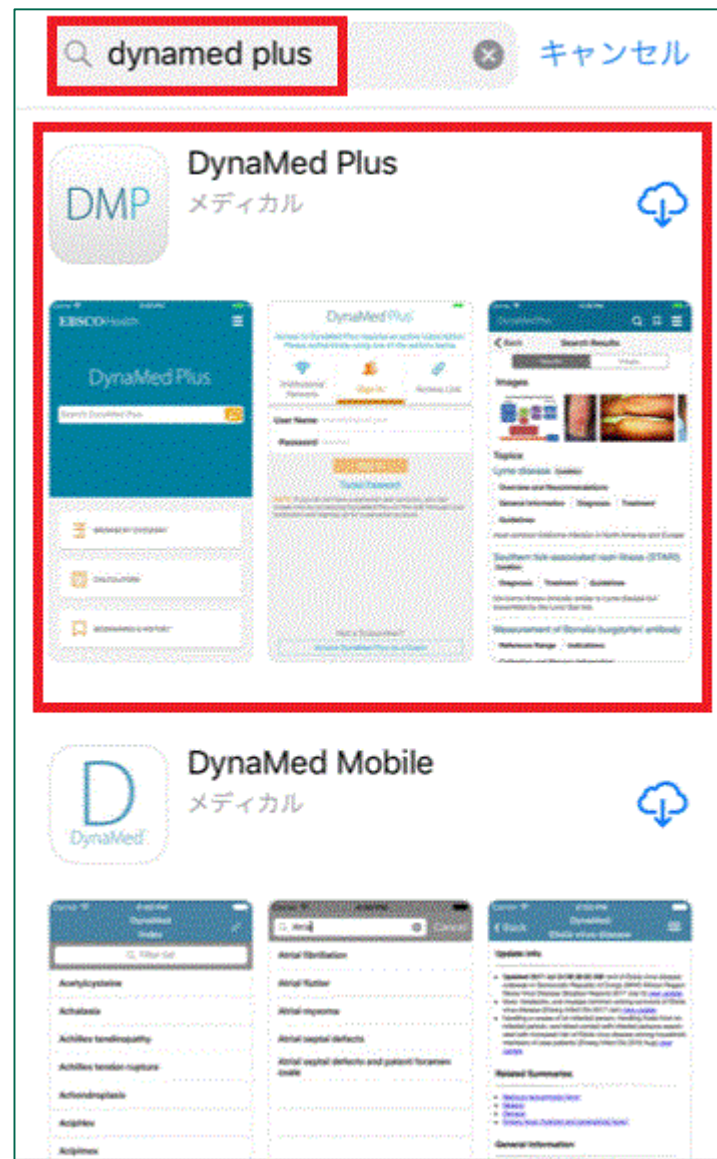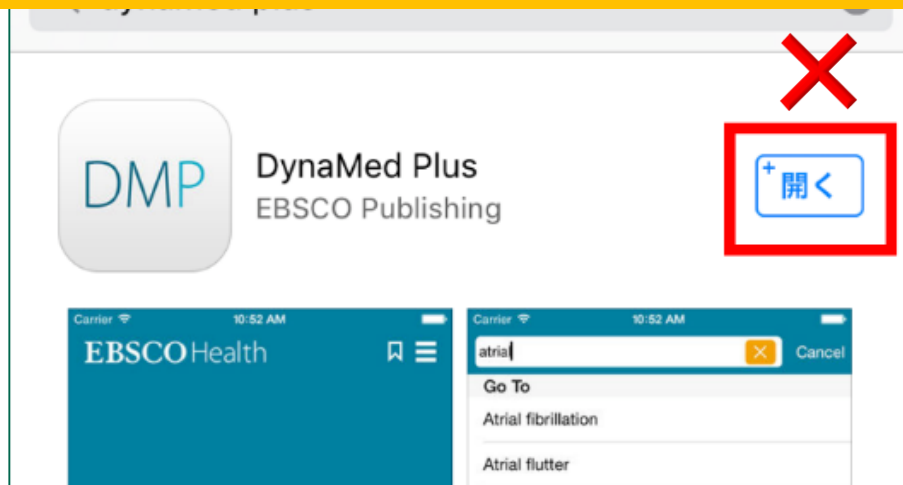

# アプリのアクティベーション手順

続いて、ダウンロードしたアプリをアクティベートするための  
認証を行います。

ここではアクティベーションの流れを説明します。

→ PCからオンライン版 DynaMed Plusにログインします。

# DynaMed Plus

Search

## Spotlight

Browse by specialty

[Get the DynaMed Plus Mobile App](#)

It's not too late for a flu shot. Don't hesitate, let's vaccinate!

## Recent Updates

View All

12/25/2016

postmenopausal

locally advanced

Topic: Management

2.

パソコンでオンライン版 DynaMed Plus  
にアクセスし、画面左側に表示された  
「**Get the DynaMed Plus Mobile App**」  
のリンクをクリックします。

### 3. 認証キーをメールで送る

認証キーを送るメールアドレスを入力し、メールを送信します。

#### DynaMed Plus Mobile App

Enter your email address to send yourself the instructions, key and a link to download the app.

Email to

jp-medical@ebSCO.com

Send

Cancel

[Learn More](#)

**「 Send 」 をクリック**


Calculators

Search DynaMed Plus

Search

Mobile App

tulvestrant 500 mg increases progression-free survival compared to anastrozole 1 mg

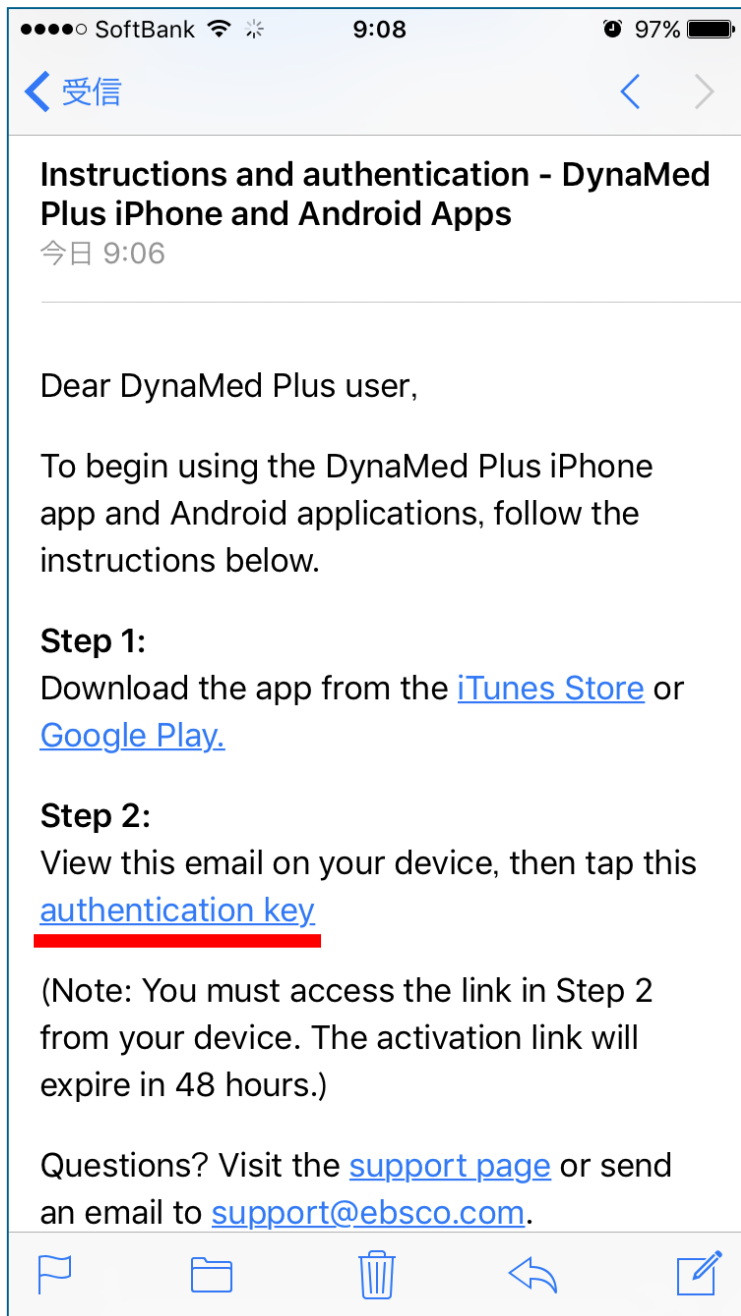

## 4.

届いたメールをアプリをダウンロードしたモバイル端末で開きます。

「**authentication key**」のリンクをタップして認証を行い、アプリをアクティベートします。

※この認証キーは48時間で失効します。失効した場合、再度認証キーの申請を行ってください。



## 5. アプリのアクティベートについて

「**authentication key**」のリンクをタップすると左の画面が表示されます。

「**開く**」をタップし、DynaMed Plusアプリの「**Terms of use**」に移動します。



Safari 9:08 97%

## Terms of Use

DynaMed products provide a clinical decision support system and reference service. This software is only an aid to the practitioner and cannot be a substitute for conscientious clinical practice in which an appropriately qualified health care provider with current knowledge and skills delivers high standard medical and nursing care with caution and common sense. The editors have checked with sources believed to be reliable in an effort to ensure that the information provided is relevant, up to date and of a standard acceptable at the time of publication.

I agree to be bound by the current [Terms of Use](#) and [Terms of Service](#) respectively, as posted, including the Limitation of Liability Agreement set out below.

### DISCLAIMER/LIMITATION OF LIABILITY

Because of the broad scope, wide coverage and the possibility of human error or changes in medical sciences, the authors, editors and the publisher do not warrant that the information is in every respect accurate, complete or up to date. All users should use the information for their own medical reference only.

**I Accept をタップします。**

By tapping "I Accept", you are agreeing to the Terms of Use

I Accept



## DynaMed Plus

**Authentication Successful!**

Your access to DynaMed Plus will continue through

Mar 25, 2019

Continue

**Continue をタップします。**

# DynaMed Plus

## Choose an installation option

You can change this in user settings at any time.

### Online Only

110.7 MB

Must have internet connection to access content.

### Partial Install

542.7 MB

Store text and thumbnails on your device. Full images available when connected to the internet.

### Full Install

1.04 GB

Store all content on your device.



選択し、**Continue**をタップします。

Continue

## インストール形式を選択します

### Online Only

オフライン利用不可。  
インターネットへの接続が必要です。

### Partial Install

オフライン利用可。  
画像なしでのインストールです。  
ネットに接続された状態だと、画像データが閲覧できます。

### Full Install

オフライン利用可。  
画像ありでのインストールです。  
最も容量が大きくなります。  
オフライン状態でも、画像データが閲覧できます。



Evidence-based, trustworthy  
clinical information

Downloading content


18%



**初回インストールには、画像あり版の場合、最大で20-30分ほどかかります**

**インストールが途中で停止した場合は、アプリを再起動して、インストールを再開してください。**

**※Wifi接続を推奨**

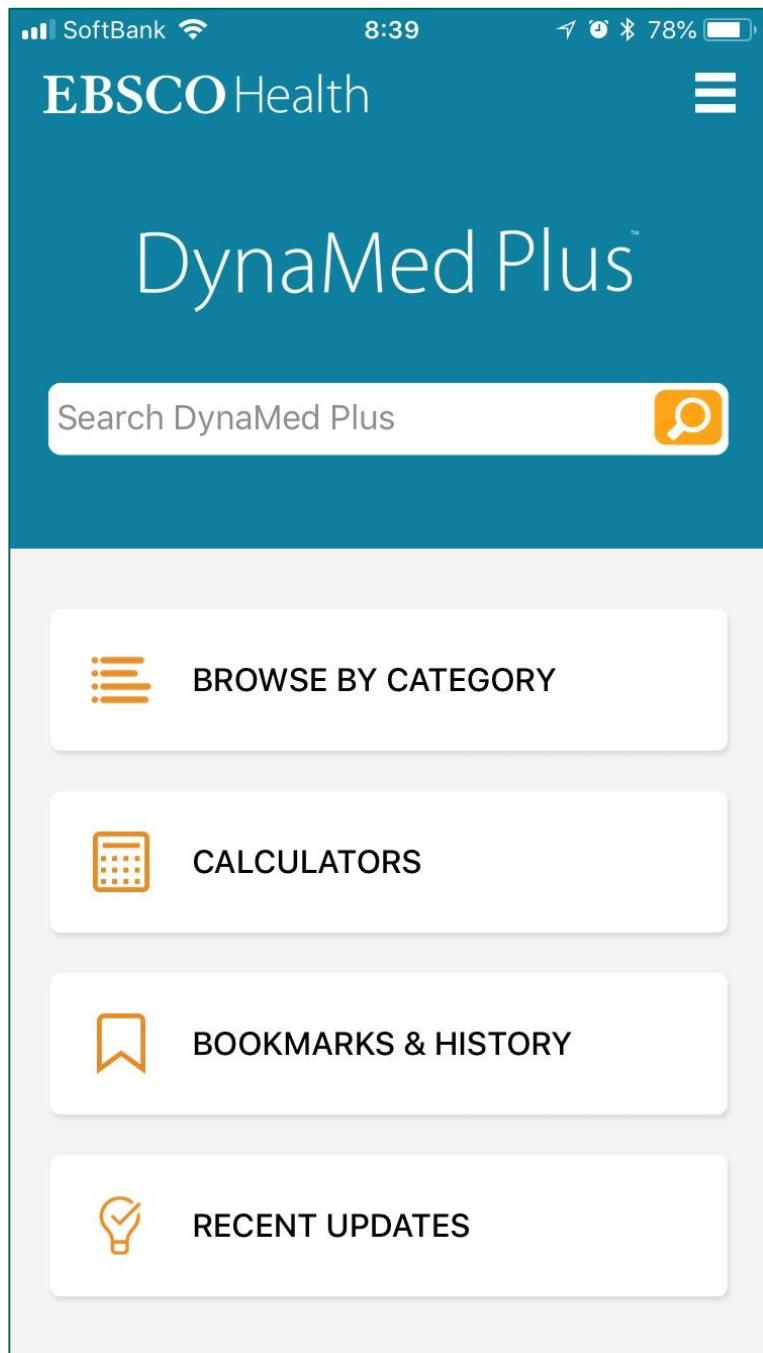

インストールが完了すると、  
DynaMed Plusの検索トップ画面  
が表示されます。

インストール後は機内モード等  
の**オフライン**状態でもアプリを  
利用できます。

アクティベーションから**6ヶ月間**は  
そのままご利用いただけます。

6ヶ月経ち、再度認証を求められたら、  
「**3. 認証キーをメールで送る**」から  
行ってください。


## 6. データの更新について


右上のメニューから



**Update Status** へと進みます。

1週間に1度程度、更新情報が  
リリースされます。  
適宜、手動で情報のアップデートを  
行ってください。

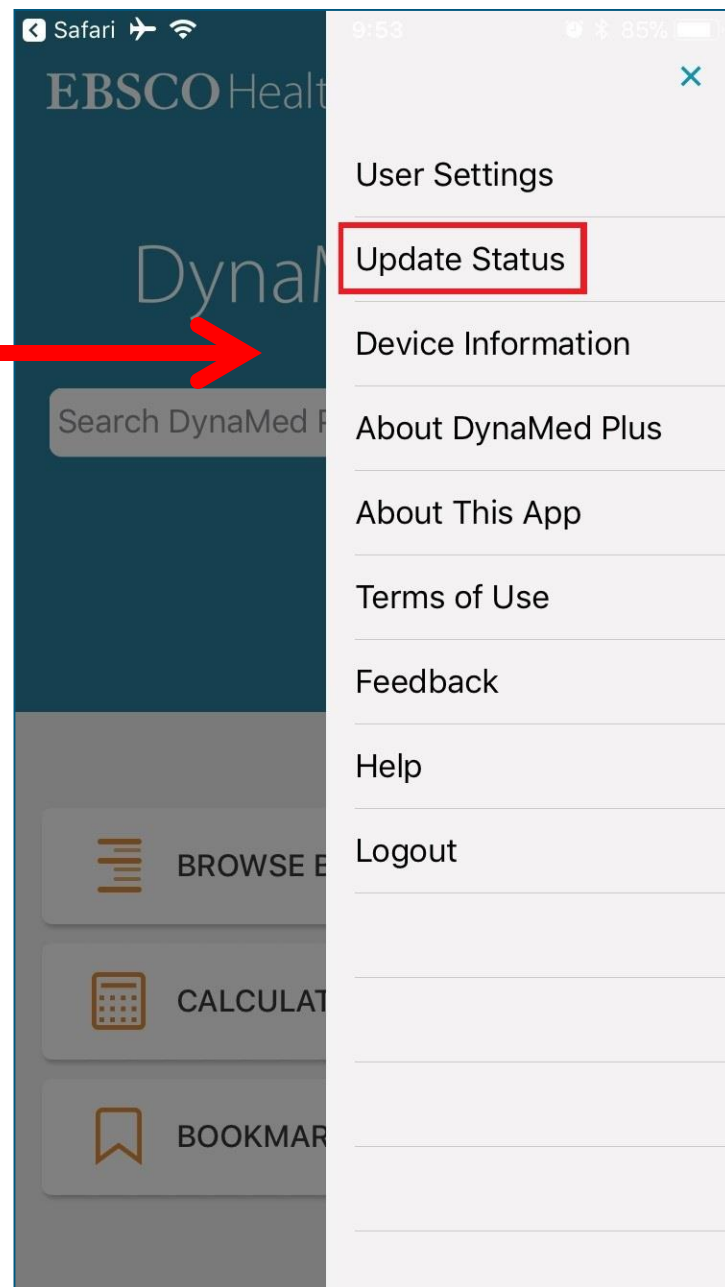

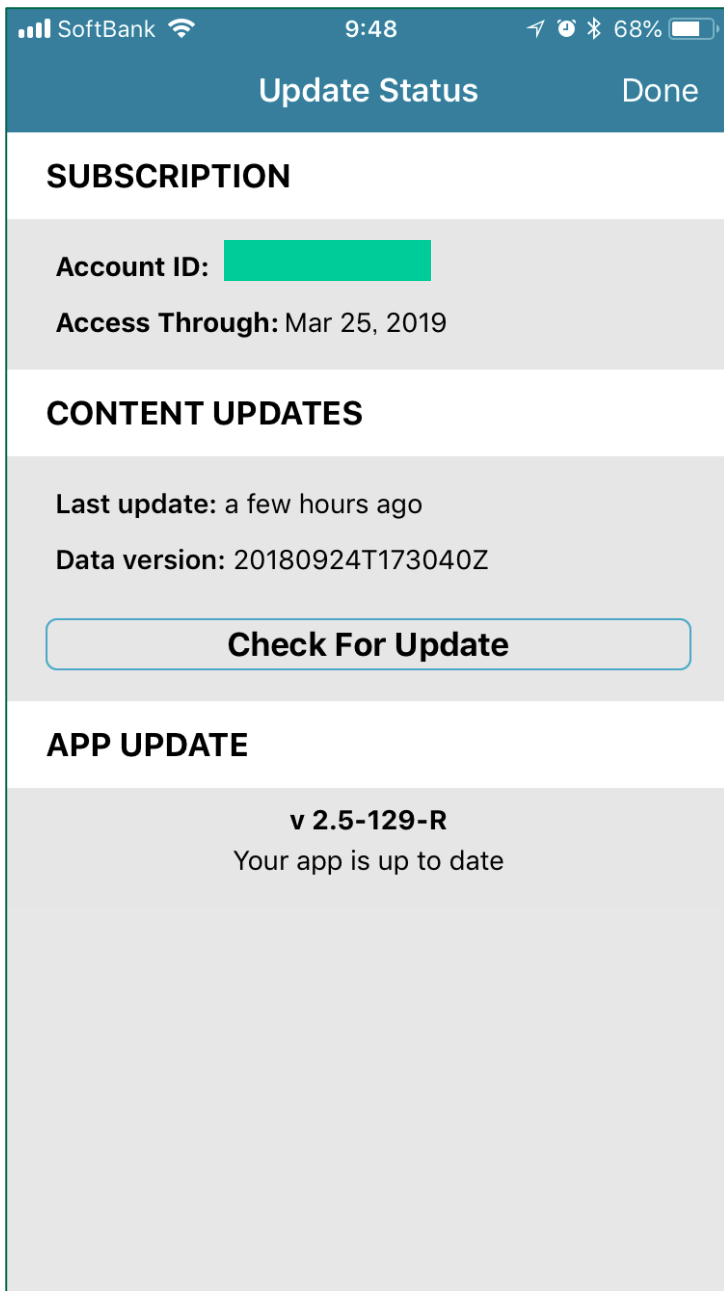

Update Status画面に入り、  
中央に表示されている


「**Check For Update**」または  
「**Force Update Now**」をタップします。

この画面で、最後の更新日等の  
アプリのステータスが確認できます。

# モバイルアプリの利用方法

**アプリの基本的な検索方法や  
各アイコンについて説明します。**

**基本的な検索方法は、  
オンライン版と共通です。**

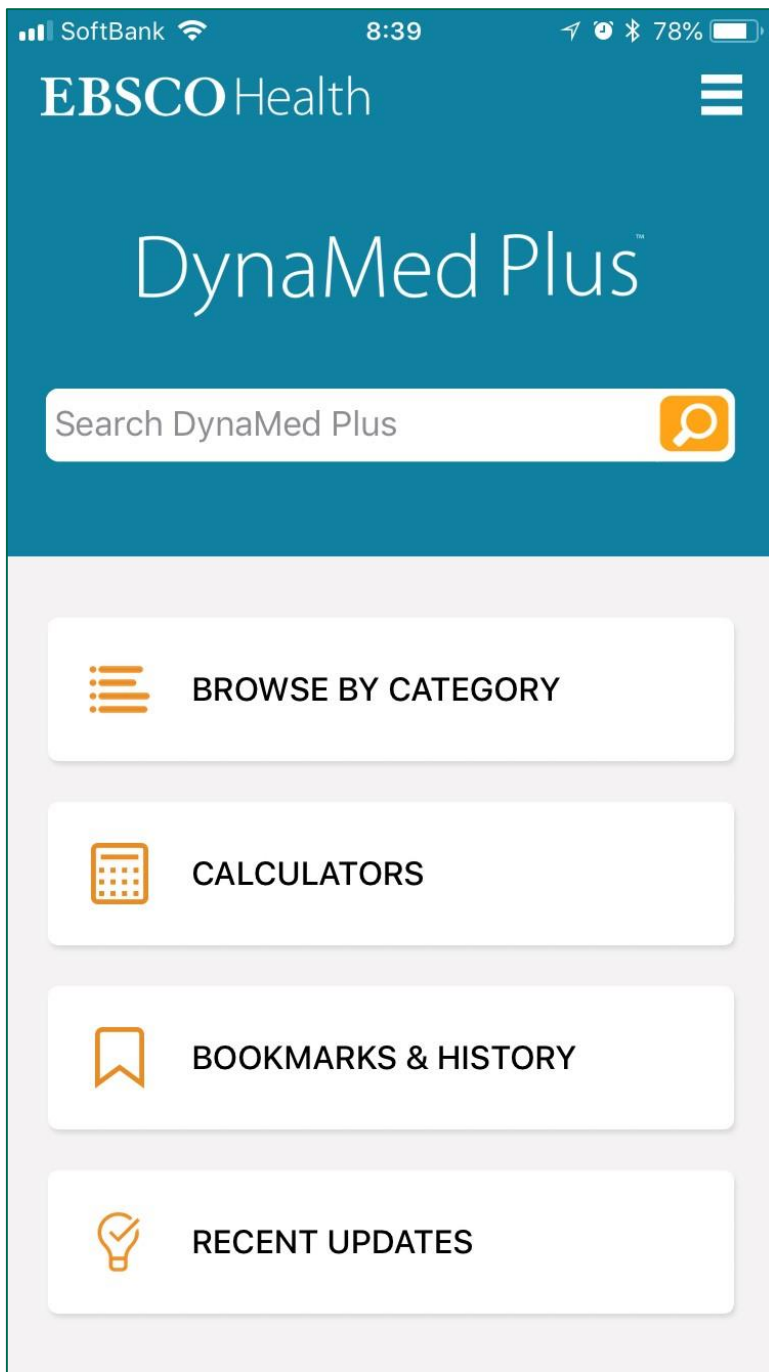

## 1. 検索トップ画面

入力ボックスに疾病名や疾患名等を入力。  
オートコンプリートで候補が表示されます。

### **BROWSE BY CATEGORY**

→ 専門領域別にトピックを検索できます。

### **CALCULATORS**

→ 各種カリキュレーター(評価指標)


### **BOOKMARKS&HISTORY**

→ ブックマークしたトピックや閲覧履歴が確認できます。

### **RECENT UPDATES**

→ トピックの更新履歴が確認できます。



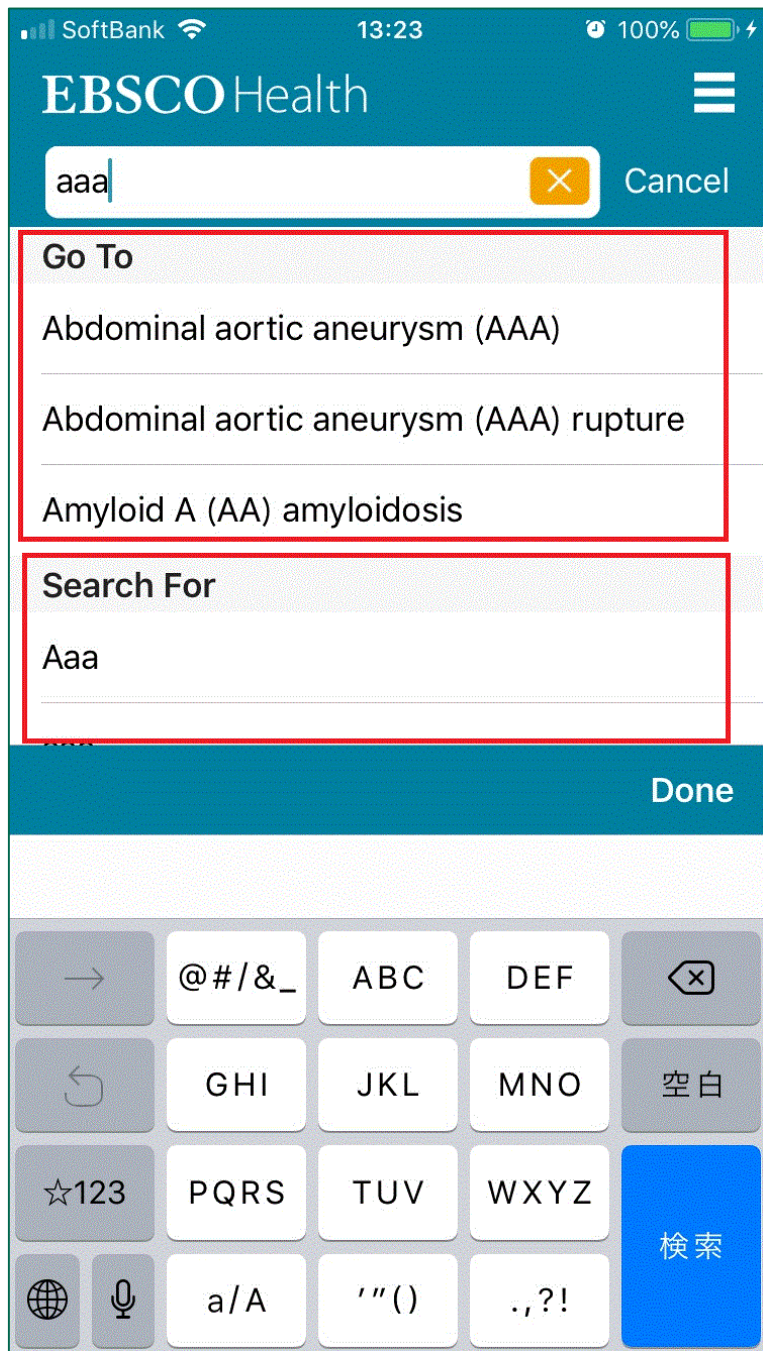

## 2. オートコンプリート

入力を始めると左の画面が開きます。

**Go To**以下のトピックをタップ

→ そのトピックに直接ジャンプします。

**Search For** 以下の用語をタップ

→ その用語でDynaMed Plus内を検索します。検索結果一覧が表示されるので、その中で任意のトピックをタップして、トピック内に移動します。

### 3. 検索後の画面例

Go Toのトピックを  
タップした場合

Abdominal aortic aneurysm (AAA)

Overview and Recommendations

[+] Updated 2018 Mar 29 04:08 PM (ET)

ACP™ Produced in collaboration with the American College of Physicians

**Topic Editors**  
Eric A. Osborn, MD, PhD, MSc  
Maria Sciammarella, MD

**Recommendations Editor** Esther  
Jolanda van Zuuren, MD

**Deputy Editor** Peter Oettgen MD,  
FACC, FAHA, FACP

Overview and Recommendations

Search Forの用語  
をタップした場合

Aaa

Results Images Calcs

Abdominal aortic aneurysm (AAA)


**Condition**  
abnormal full-thickness dilation of abdominal aorta resulting in diameter > 3 cm or exceeding normal vessel diameter by > 50%

Overview and Recommendations History and Physical  
Diagnosis Treatment

スクロールすると、その用語に関連したトピックが表示されます。

Images

## 4. トピック内の項目について


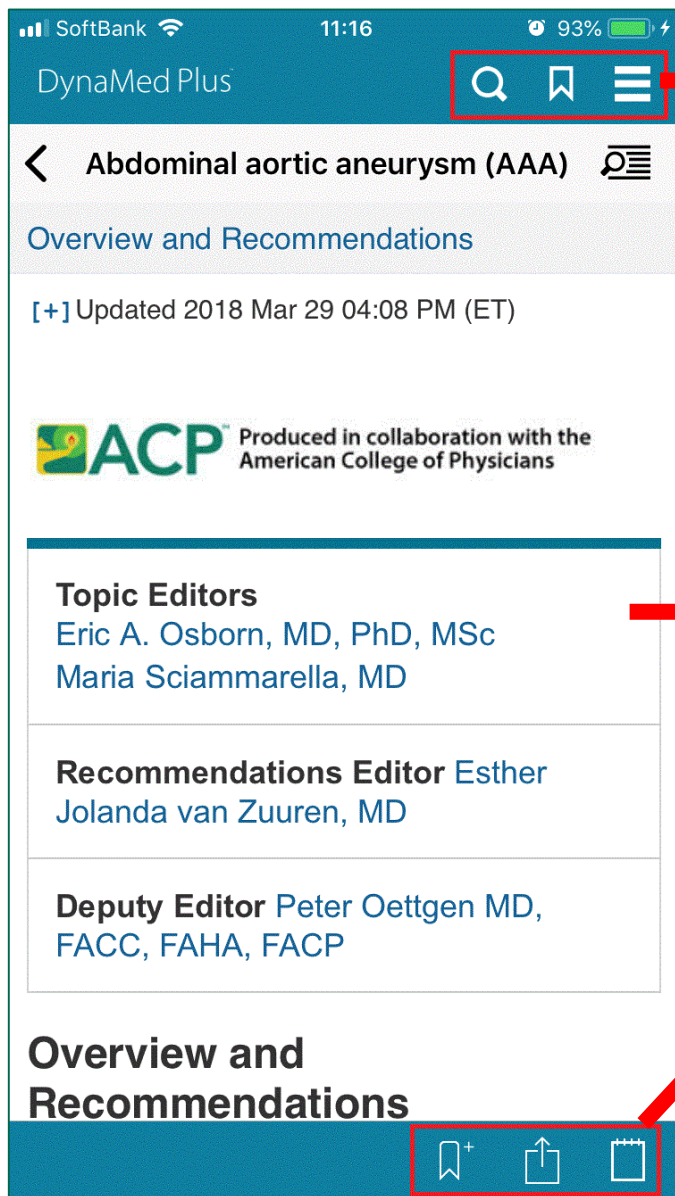


左から、新規検索、ブックマーク等の確認、メニューの順です。

このトピックの編集に携わったエディターが確認できます。タップすると、編者の詳細情報に移動します。


左から、このトピックをブックマーク、トピックの共有、メモ機能の順です。

## 5. トピック内検索とセクション一覧

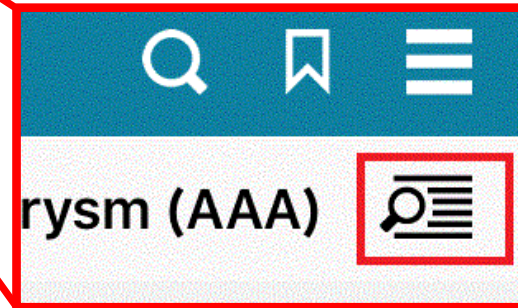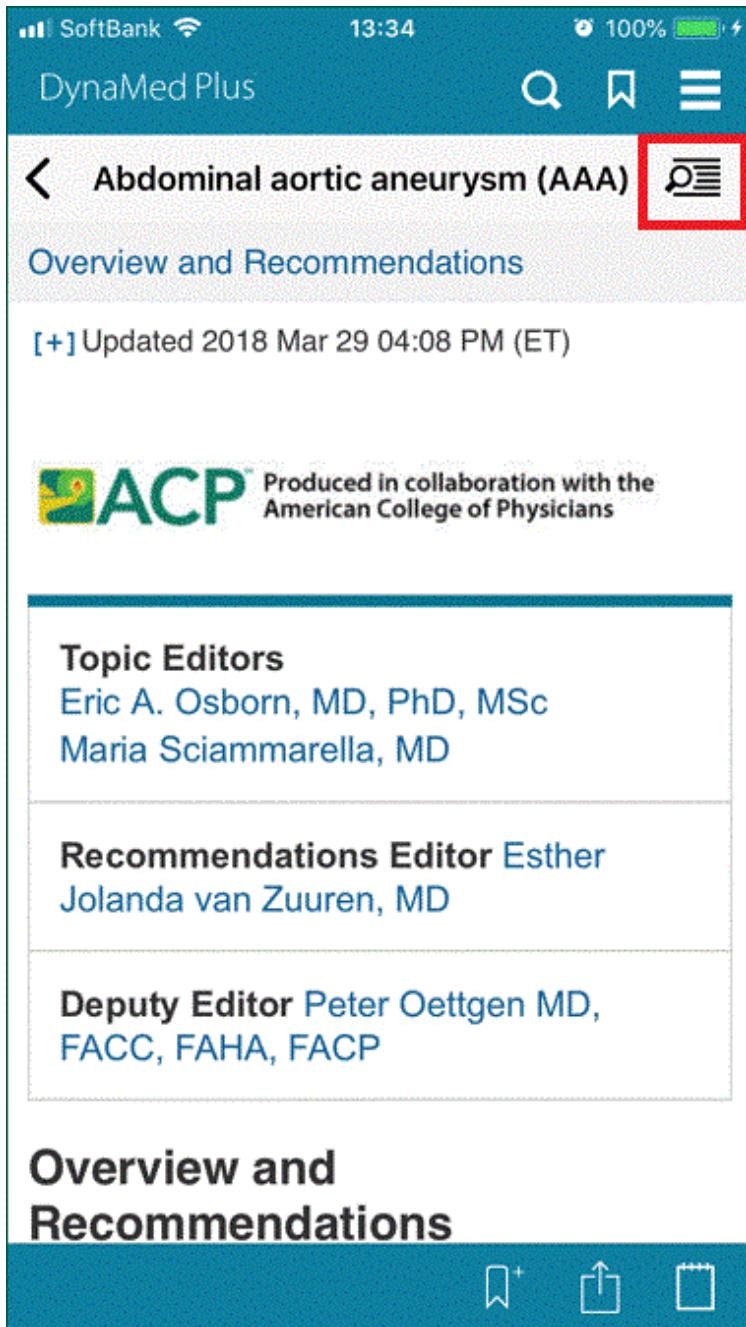

このアイコンをタップすると、トピック内検索とセクション一覧画面に移動します。

## 5. トピック内検索とセクション一覧

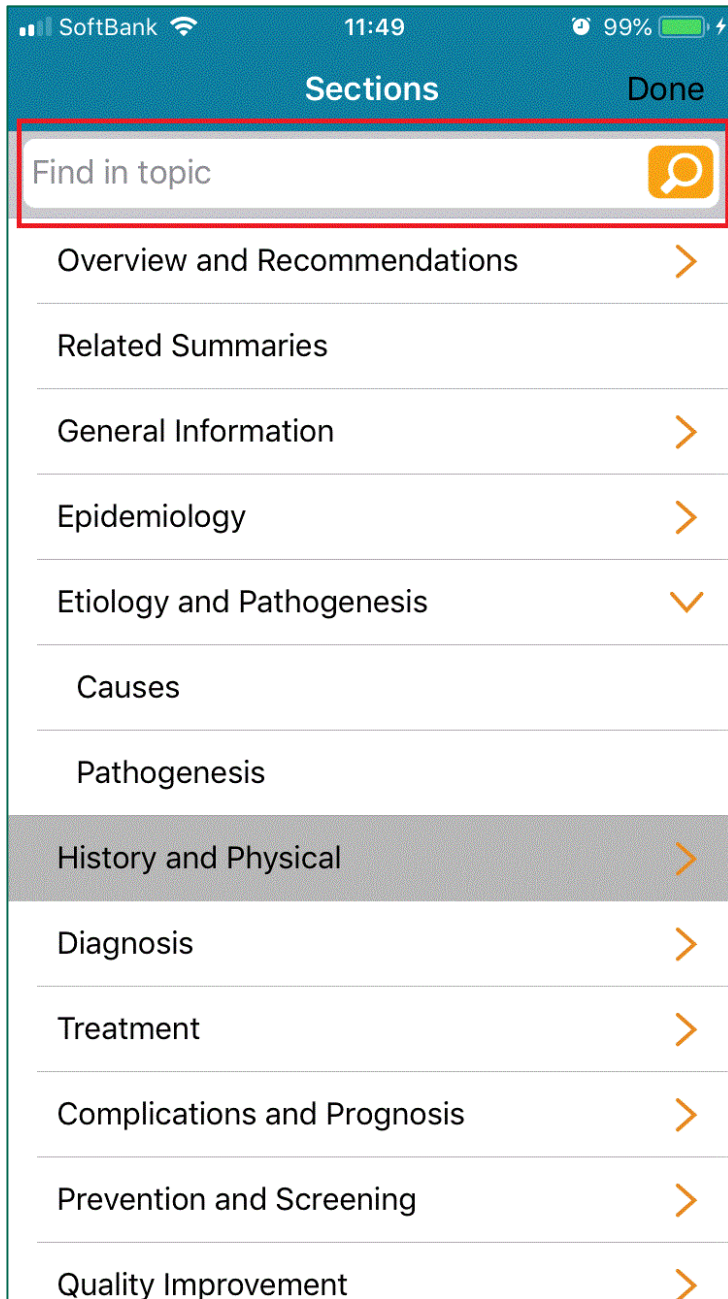

任意の用語をトピック内で検索します。  
情報を絞り込む際に便利です。

セクション名をタップすると、  
当該セクションにジャンプします。

「>」をタップするとセクション内の項目を展開できます。

作成日：2018年9月25日

\*仕様等、予告無く変更する場合があります。

EBSCO Information Services Japan 株式会社

〒164-0001 東京都中野区中野2-19-2 中野第 I OSビル3階

Tel : (03) 5342-0701 Fax : (03) 5342-0703 E-mail : [ip-medical@ebSCO.com](mailto:ip-medical@ebSCO.com)